
# TOTOKU

## CCL 550i2/AR





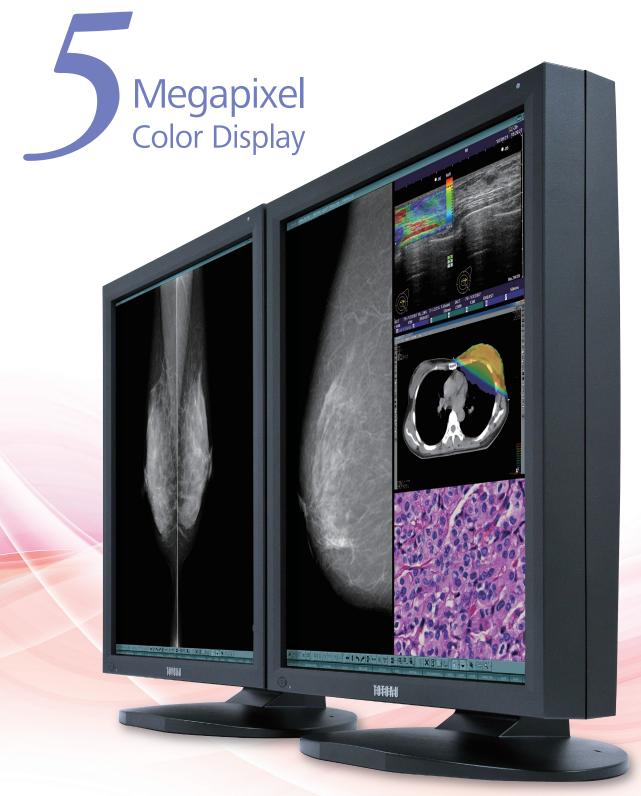

モノクロ画像とカラー画像を最適な輝度と階調で同時表示できる高精細500万画素表示モデル。

さまざまなモダリティのカラー解析画像表示を可能にします。























CCL 550i2/AR

21.3型 TFTカラー IPS方式 水平337.92mm×垂直422.4mm

1300:1 (Typ.)

1000cd/m (Typ.) 出荷設定500cd/m·410cd/m

176°(上下•左右) 2048x2560 (Fv=50Hz) 1677万色(280兆色中 DisplayPort 10bit入力時は10億6433万色) DVI-D(DVI1.0 準拠)、

DDC2B 対応

周囲の明るさ

約95W 2W以下

水平0.165mm×垂直0.165mm

CCL550i2/AR (特殊ARコート付きモデル)

DisplayPort(DisplayPort1.1a 準拠)

(オプションのキャリブレーションキットが必要)

(経過時間、設定輝度、ガンマなど)、現在の輝度、

ANSI/AAMI ES60601-1(2005)+C1:09+A2:10, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1(2008), CE (EN60601-1, EN60601-1-2),

FCC Part15 subpart B Class B, ICES-003-B,

474.5mm×483.1/544.6mm×220mm

390mm×525.2/586.7mm×220mm

VCCI-B 適合, FDA 510(k), J-Moss, RoHS

スタンドを除く本体のみの質量は約7.8kg

VESA基準(取り付けピッチ:100×100mm)

盗難防止セキュリティロックスロット付き

電源コード、DVIケーブル、 DisplayPortケーブル、USBケーブル、

取扱説明書、保証書、クリーニングキット

製品情報、稼働時間、キャリブレーション状態

USB規格 Rev.2.0準拠 セルフパワード Upストリーム1ポート、Downストリーム2ポート ユニフォミティー補正、ハードウェアピボット、 LEDインジケータ、拡張パワーセーブ機能、

コンフィグレーション切替機能、 セルフDICOMチェック機能

ランドスケープ使用時

チルト、スイーベル機能付き

(本体及びスタンド部)

525.2 /

349.

6

ポートレート使用時

約12.0kg

AC100~240V,50/60Hz

輝度 ガンマ 色度の調整

※3種類の設定を保持可能

仕 様

モデル名

表示画面サイズ

コントラスト比

プラグアンドプレイ 入力電源

消費電力通常時 パワーマネジメント動作時

OSD表示

その他の機能

外形寸法 (スタンドを含む)

スタンド 本体取り付け部

セキュリティー機構

390 339.2

344

物理的 仕様

123.


#### 高精細500万画素液晶パネルを搭載し、マルチモダリティ画像表示に対応

高精細500万画素のカラー液晶パネルの搭載により、モノクロのマンモグラフィ画像だけではなく、 カラーで解析された超音波診断装置、MRI、病理画像など、マルチモダリティ画像表示に対応します。



#### 最適な輝度と階調で画像表示を可能にするダイナミックガンマ機能を搭載

当社独自のダイナミックガンマ機能に より、画面内に混在するモノクロ画像 とカラー画像を自動的に識別し、それ ぞれに最適な輝度および階調で表示 が可能です。

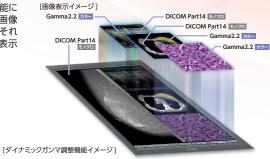

#### 高精細液晶パネルの採用により、微細な形状もより忠実に表示が可能

解像度2048ドットx2560ドット(500万画素)、画素ピッチ $165\mu$ mの高精細液晶パネルの採用 により、医用画像の微細な形状もより忠実に表示が可能です。

#### テキスト(白)表示時に自動的に輝度を抑えるオートテキストモード機能を搭載

レポートや患者リストなどのテキスト(白)表示 を本機が自動的に検知し、その表示面積に 応じて画面の輝度を抑えるオートテキスト モード機能を搭載。これまで、高輝度に設定 されている医用画像表示用ディスプレイでの テキスト(白)表示は明る過ぎて見づらくなって いましたが、本機能により画面の輝度を抑え、 日のストレス(疲労)を軽減します。





[ゲインコントロール機能イメージ]

### LEDバックライトの採用により、長寿命・省電力化を実現

LEDバックライトの採用により、長寿命化及び省電力化を実現しました。また、LEDバックライトは 水銀を使用していないため、環境負荷の低減に配慮しています。

#### 当社独自の輝度安定システム"λ-Sentinel(ラムダセンチネル)"

画面上に配置されたフロントセンサーで画面の実測輝度を常時監視し、フィードバックする輝度 安定化システム" $\lambda$ -Sentinel(ラムダセンチネル)"により、高精度な輝度の安定化を実現します。

#### ユニフォミティ補正機能搭載

輝度ムラ色ムラの補正を行い、より均一な画像表示を実現するユニフォミティ補正機能を搭載しました。

#### "DICOM適合性試験"機能を搭載

本機画面上に配置されたフロントセンサーにより、"DICOM適合性試験" (DICOMカーブに準拠した グレースケール表示の試験)が本機単体で行えます。

※本カタログ製品は医療機器ではありません。

- "TOTOKU"は、株式会社JVCケンウッドの展開する医用および産業用ディスプレイのブランドです。
- ●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、予めご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

220

#### 安全点検 の お願い

## このような症状はありませんか

●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。

#### ご使用中止 ーコンセントから電源プラグを 抜いて必ず販売店に ご相談ください。

安全に関する ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と 「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

### ヘルスケア事業統括部 営業部

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

TEL 045-450-1890

ヘルスケアシステム統括部 大阪営業部

〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28 2F

TEL 06-6304-5844



家電公取協会員

株式会社 JVC ケンウッド

〒221-0022 横浜市神奈川区守屋町3-12

www.jvckenwood.com